

**Le masque facial SEAMLESS est utilisé comme moyen de prévention contre la transmission virale par voie aérienne et par le toucher du visage.**

Le masque facial textile constitue une solution barrière contre la propagation du virus par le toucher du visage et minimise la transmission d'organismes en suspension dans l'air par les personnes se trouvant à proximité, par la toux, la parole, les éternuements ou par voie respiratoire.


Le masque facial est conçu sans soudure et se présente sous forme d'une structure tubulaire d'une seule pièce, ce qui permet d'éliminer l'utilisation de bandes élastiques irritantes autour des oreilles. La conception du produit garantit une utilisation facile et sans risque ainsi qu'un ajustement correct de sorte que le masque reste en place et est particulièrement confortable à porter. Par rapport aux masques à usage unique, le masque Seamless est meilleur pour l'environnement, étant donné qu'il est lavable et réutilisable.

#### Caractéristiques :

- Réduit le risque de contamination virale par voie aérienne en empêchant la contamination par le toucher du visage et la transmission du virus en suspension dans l'air
- Protège l'utilisateur et les personnes se trouvant à proximité
- Facile à porter
- Son ajustement correct garantit un confort élevé et un bon positionnement
- Souple, flexible, sans soudure et tissu respirant
- Peut-être plié en petit format et facilement rangé dans un sac ou une poche
- Lavable et réutilisable – peut être lavé jusqu'à 25 fois
- Texture sans latex pour la sécurité de l'utilisateur
- Ne contient aucune substance toxique conformément à la norme Oeko-Tex 100

#### Mode d'emploi

- Lavez-vous soigneusement les mains avant d'appliquer le masque facial.
- Poser le masque depuis le haut de la tête, la partie la large se trouvant du côté du nez et la partie étroite du côté de la nuque.
- Avec les deux mains, tirez le masque vers le bas autour de la tête et couvrez bien le nez et la bouche.
- Placez le masque facial juste en-dessous des oreilles et autour du cou. Attention à ne pas toucher la bouche, le nez ou les yeux lors de l'application du masque.

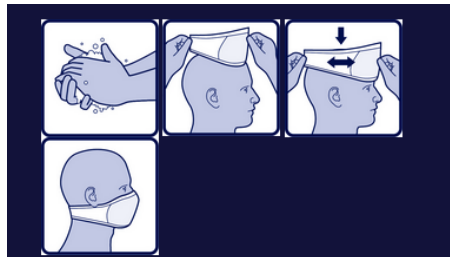

#### Retrait

- Lavez-vous soigneusement les mains avant de retirer le masque.
- Retirez le masque en soulevant la partie étroite couvrant la nuque au-dessus de la tête et retirez ensuite le masque de la bouche et du nez, tout en tenant la partie étroite.
- Attention à ne pas toucher la bouche, le nez ou les yeux lors du retrait du masque.



Le masque facial peut être réutilisé 25 fois maximum après un lavage à 95°C pendant 25 minutes.

**Composition:**

94% Polyamide, 6% Élasthanne

**Instructions de lavage**

**Tailles disponibles :** S/M and M/L

**Couleurs disponibles :** Blanc, noir, beige

**Emballage :** Sachet de 100 pièces

**CE classification :** Class I, Non Stérile

**Stockage:** Garder au sec à la température ambiante et ne pas exposer direct au soleil

**Durée de vie:** 5 ans à dater de la date de fabrication

**Het SEAMLESS gelaatsmasker wordt gebruikt als een middel om virale overdracht door de lucht en door het aanraken van het gezicht te voorkomen.**

Het textiele gelaatsmasker biedt een barrièreoplossing tegen de verspreiding van het virus door gezichtscontact en minimaliseert de overdracht van organismen in de lucht door mensen in de omgeving, door hoesten, praten, niezen of ademen.

Het gelaatsmasker is naadloos ontworpen als een buisvormige structuur uit één stuk, waardoor er geen irriterende elastieken rond de oren nodig zijn. Het productontwerp zorgt voor een eenvoudig en veilig gebruik en een correcte pasvorm, zodat het masker op zijn plaats blijft en bijzonder comfortabel is om te dragen.


Vergeleken met eenmalig te gebruiken maskers is het Seamless-masker beter voor het milieu, omdat het wasbaar en herbruikbaar is.

**Functies :**

- Vermindert het risico op virusbesmetting in de lucht door het aanraken van het gezicht en de overdracht van het virus in de lucht te voorkomen.
- Beschermde gebruiker en de mensen in de omgeving
- Gemakkelijk te dragen
- De juiste pasvorm zorgt voor een hoog comfort en een goede positionering
- Zachte, flexibele, naadloze en ademende stof
- Kan worden opgevouwen tot een klein formaat en gemakkelijk worden opgeborgen in een tas of zak.
- Wasbaar en herbruikbaar - kan tot 25 keer worden gewassen
- Latexvrije textuur voor de veiligheid van de gebruiker
- Bevat geen giftige stoffen volgens Oeko-Tex Standaard 100


**Instructies voor gebruik****Gebruik**

- Was uw handen grondig voordat u het gezichtsmasker aanbrengt.
- Breng het masker aan vanaf de bovenkant van het hoofd, met het brede gedeelte aan de zijkant van de neus en het smalle gedeelte aan de zijkant van de nek.
- Trek het masker met beide handen naar beneden rond het hoofd en bedek de neus en de mond goed.
- Plaats het gezichtsmasker net onder de oren en rond de hals. Pas op dat u de mond, neus of ogen niet aanraakt bij het aanbrengen van het masker.

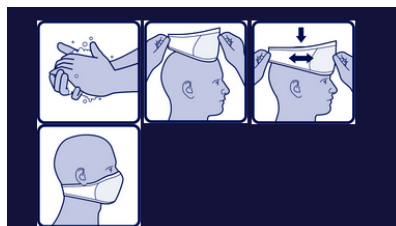

#### Terugtrekking

- Was uw handen grondig voordat u het masker afneemt.
- Verwijder het masker door het smalle gedeelte dat de nek boven het hoofd bedekt op te tillen en verwijder vervolgens het masker uit de mond en de neus terwijl u het smalle gedeelte vasthoudt.
- Pas op dat u de mond, neus of ogen niet aanraakt bij het verwijderen van het masker.

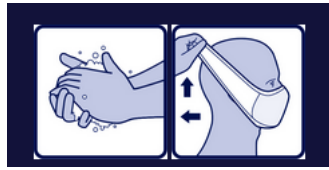

Het gezichtsmasker kan maximaal 25 keer worden hergebruikt na het wassen op 95°C maximaal 25 minuten.

**Compositie:** 94% Polyamide, 6% Elastane

#### Wasvoorschriften



**Beschikbare maten :** S/M en M/L

**Beschikbare kleuren:** Wit, zwart, beige

**Verpakking :** Zakje van 100 stuks

**EG-classificatie:** Klasse I, niet steriel

**Opslag:** Droog houden bij kamertemperatuur en niet blootstellen aan direct zonlicht.

**Levensduur:** 5 jaar vanaf de fabricagedatum.

**Die Carefix-Gesichtsmaske wird als Mittel zur Verhinderung der Virusübertragung durch die Luft und durch Berührung des Gesichts verwendet.**

Die textile Gesichtsmaske stellt eine Barriere gegen die Ausbreitung des Virus durch Gesichtskontakt dar und minimiert die Übertragung von luftübertragenen Organismen durch Personen in der Umgebung durch Husten, Sprechen, Niesen oder Atmen.

Die Gesichtsmaske ist nahtlos als einteilige Schlauchstruktur ausgeführt, wodurch die Notwendigkeit von störenden Gummibändern um die Ohren entfällt. Das Produktdesign gewährleistet eine einfache und sichere Anwendung und einen korrekten Sitz, so dass die Maske an ihrem Platz bleibt und besonders angenehm zu tragen ist. Im Vergleich zu Einwegmasken ist die Seamless-Maske besser für die Umwelt, da sie abwaschbar und wiederverwendbar ist.


#### Funktionen:

- Reduziert das Risiko einer luftübertragenen Viruskontamination, indem eine Kontamination durch Berührung des Gesichts und die Übertragung des luftübertragenen Virus verhindert wird.
- Schützt den Benutzer und Personen in der Umgebung
- Leicht zu tragen
- Korrekter Sitz gewährleistet hohen Komfort und gute Positionierung
- Weiches, flexibles, nahtloses und atmungsaktives Gewebe
- Kann zu einem kleinen Format gefaltet und leicht in einer Tasche oder einem Fach aufbewahrt werden
- Waschbar und wiederverwendbar - kann bis zu 25 Mal gewaschen werden
- Latexfreie Textur für Benutzersicherheit
- Enthält keine toxischen Substanzen nach Öko-Tex Standard 100

### Instruktionen für den Gebrauch


Verwenden Sie

- Waschen Sie sich vor dem Auftragen der Gesichtsmaske gründlich die Hände.
- Tragen Sie die Maske vom Scheitelpunkt des Kopfes aus auf, wobei der breite Teil auf der Seite der Nase und der schmale Teil auf der Seite des Nackens liegt.
- Ziehen Sie die Maske mit beiden Händen um den Kopf herum nach unten und decken Sie Nase und Mund gut ab.
- Platzieren Sie die Gesichtsmaske direkt unter den Ohren und um den Hals. Achten Sie beim Auftragen der Maske darauf, Mund, Nase oder Augen nicht zu berühren.

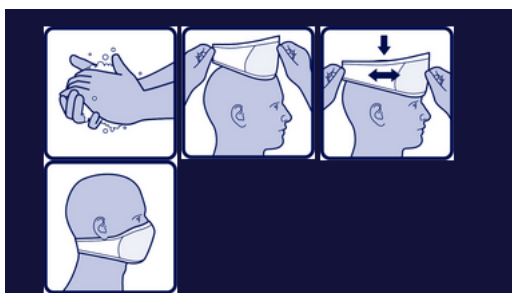

### Rückzug

- Waschen Sie sich vor dem Abnehmen der Maske gründlich die Hände.
- Entfernen Sie die Maske, indem Sie den schmalen Teil, der den Nacken bedeckt, über den Kopf heben und dann die Maske von Mund und Nase abnehmen, während Sie den schmalen Teil festhalten.
- Achten Sie beim Abnehmen der Maske darauf, Mund, Nase oder Augen nicht zu berühren.

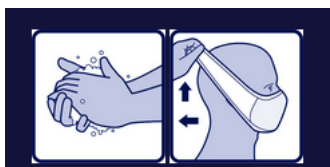

Die Gesichtsmaske kann nach dem Waschen bei 95°C maximal 25 Mal wiederverwendet werden. Maximale wäsche 25 minuten.

#### Zusammensetzung:

94% Polyamid, 6% Elasthan

#### Instruktionen zum Waschen



**Verfügbare Größen :** S/M und M/L

**Verfügbare Farben:** Weiß, Schwarz, Beige

**Verpackung :** Beutel mit 100 Stück

**EC-Klassifikation:** Klasse I, nicht steril

**Lagerung:** Trocken bei Raumtemperatur aufbewahren und nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.

**Lebensdauer:** 5 Jahre ab Herstellungsdatum.



**DISTRIBUTOR**  
**AVISTER-MEDICAL™**

Rue de Bruxelles 41  
4800 VERVIERS

Tel : 087/84.04.26 - Fax : 087/84.04.28

[info@avister-medical.com](mailto:info@avister-medical.com)